

Kit Mock Up

Para carillas provisionales

Temp Silic Mock up es un importante medio de comunicación entre dentista, paciente y laboratorio que permite de realizar provisionales utilizando el composite fluido altamente relleno Enamel plus HRI Flow, material estético con características físicas ideales.

Ventajas operativas y tecnológicas


- Toma de impresión con silicona y cubetas transparentes 45 seg.
- Endurecimiento de la toma de impresión 1 min. y 30 seg.
- Preparación de las carillas
- Aplicación del Flow HRI en la cubeta 30 seg.
- Fotopolimerización 60 seg.
- Fotopolimerización final con Ena Bond Seal 60 seg.



Provisionales



Carillas provisionales cementadas con Ena Soft Flow. Fotopolimerización final con Ena Bond Seal

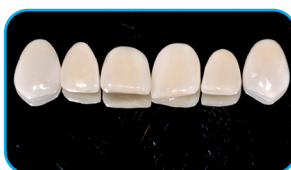

Carillas cerámicas



Resultado final tras la cementación con composite fluido fotopolimerizable (como Ena Cem^{IV})



Ref.	Descripción	Cdad
TEMPSMU	KIT MOCK UP	
	Temp Silic - Silicona Transparente 70 shore	2x50 ml
	Puntas automezclantes	8 Uds
	Cubetas transparentes para anteriores	2 Uds
	Cubetas transparentes para inferiores	2 Uds
	Cubetas transparentes para superiores	2 Uds
	Enamel plus HRI Flow	3 x 2 g
	Puntas negras Ø 1,2 mm	3 Uds
	Ena Bond Seal	2,5 ml
	Ena Soft Flow	1 g
TS1	Temp Silic Silicona transparente 70 shore	50 ml
TS1-5	Temp Silic Silicona transparente 70 shore	5 x 50 ml
TSPA	Cubetas transparentes para anteriores	25 Uds
TSPL	Cubetas transparentes para inferiores	25 Uds
TSPS	Cubetas transparentes para superiores	25 Uds